


AddOn® SML

Technische Spezifikationen

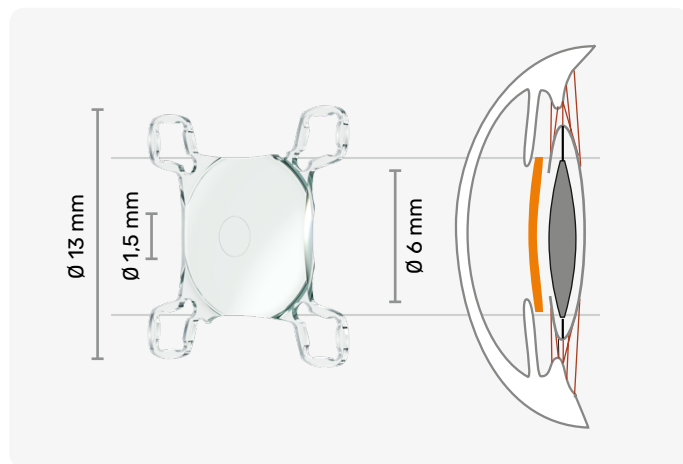

Zentrale Addition

+10,0 D

hydrophil

Refraktiver Index
1,46

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation
Dampf

Material
biokompatibles hydrophiles
Acryl (25%)

Injektionssystem
1stInject 2.0HB,
1stInject 2.4HB

Haptik
4 Flex-Haptik

Filter
UV-Filter

Optik
asphärisch, aberrationsneutral

Optikform
konvex-konkav

Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Addition
A4MW00	auf Anfrage	+10,00 D

AddOn® SML (Scharioth Makula Linse)

Die AddOn® SML ist eine probate Therapieoption für Patienten mit fortgeschrittener Makulopathie. Die zentrale Optik von +10 D bei 1,5 mm Durchmesser wirkt als miniaturisierte Lupe.

Warum AddOn® bei AMD?

- Standardisierte Implantation
- Unabhängigkeit vom Linsenstatus des pseudophaken Auges
- Fernvisus und Gesichtsfeld bleiben unverändert
- Reversibilität bei Unverträglichkeit
- Deutlich reduzierte Stigmatisierung des AMD-Patienten

Indikation

- Trockene AMD ab einem Visus von 0,1 (monokulare Implantation im besser sehenden Auge)
- Myopische Makuladegeneration
- Diabetische Makuladegeneration und andere Makulopathien

Kontraindikation

- Feuchte AMD
- Fortschreitendes Glaukom
- Schwere Zonulopathie
- Iris Neovaskularisation
- Subluxation
- Schlechte Netzhautfunktion
- Aphakie



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/addon1017



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

