


# AddOn® SML

## Technische Spezifikationen

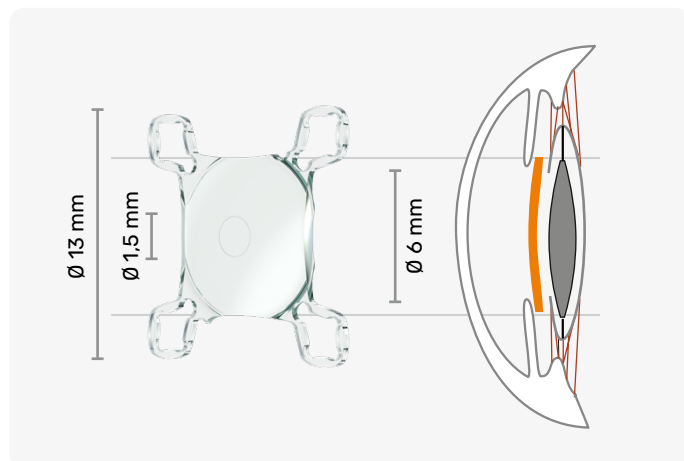

Zentrale Addition

+10,0 D

hydrophil

Refraktiver Index  
1,46

Abbe-Zahl  
58

Linsentyp  
1-teilige Sulkuslinse

Sterilisation  
Dampf

Material  
biokompatibles hydrophiles  
Acryl (25%)

Injektionssystem  
1stInject 2.0HB,  
1stInject 2.4HB

Haptik  
4 Flex-Haptik

Filter  
UV-Filter

Optik  
asphärisch, aberrationsneutral

Optikform  
konvex-konkav

## Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Addition
A4MW00	auf Anfrage	+10,00 D

### AddOn® SML (Scharioth Makula Linse)

Die AddOn® SML ist eine probate Therapieoption für Patienten mit fortgeschrittener Makulopathie. Die zentrale Optik von +10 D bei 1,5 mm Durchmesser wirkt als miniaturisierte Lupe.

#### Warum AddOn® bei AMD?

- Standardisierte Implantation
- Unabhängigkeit vom Linsenstatus des pseudophaken Auges
- Fernvisus und Gesichtsfeld bleiben unverändert
- Reversibilität bei Unverträglichkeit
- Deutlich reduzierte Stigmatisierung des AMD-Patienten

### Indikation

- Trockene AMD ab einem Visus von 0,1 (monokulare Implantation im besser sehenden Auge)
- Myopische Makuladegeneration
- Diabetische Makuladegeneration und andere Makulopathien

### Kontraindikation

- Feuchte AMD
- Fortschreitendes Glaukom
- Schwere Zonulopathie
- Iris Neovaskularisation
- Subluxation
- Schlechte Netzhautfunktion
- Aphakie



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/addon1017](http://www.1stq.de/addon1017)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

